


manuthera[®] 242



متخصص تکنیک‌های ستون فقرات

LOJER


سپهرات

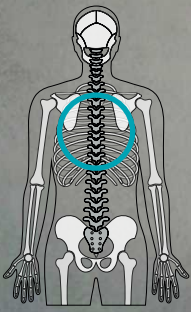

توراسیک

- ادجاست / جا اندازی دنده ها و مهره های سینه ای برای دامنه حرکتی و عملکرد بهتر
- امکان ترکیب حرکات خمش به جلو، پهلو و چرخش با کمک نیروی جاذبه
- امکان استفاده از حرکات داینامیک برای اجرای تکنیک های درمانی بافت نرم
- امکان دسترسی به بافت های عمقی تر


manuthera[®] 242

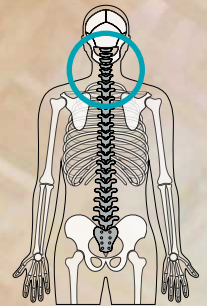

کشش ستون فقرات گردنی

- دسترسی به سطح کناری مهره های گردنی و لیگامانها
- آزادسازی تنش از مناطق سفت و تحت فشار
- درمان نواحی گردن و شانه

مهره های کمر

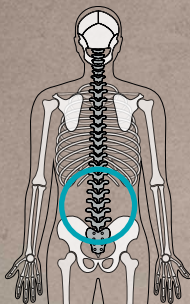

- درمان سه بعدی ناحیه کمری - لگنی
- ترکیب حرکات مهره ها در سه صفحه حرکتی و امکان اضافه کردن دیسترکشن
- دکامپرشن مهره های کمر برای درمان دیسک
- امکان ایجاد وارونگی و کشش کلی ستون فقرات



Manipulation / Drop Technique ●

بخش هایی از تخت مانند ناحیه لگن، پستی و گردنی دارای مکانیزم Drop هستند؛ یعنی در هنگام اعمال نیروی سریع توسط درمانگر، بخشی از تخت رها می شود تا فشار ضربه ای کمتری به بیمار وارد شود. این روش برای اصلاح انحرافات ساختاری و تنظیم مفاصل کاربرد دارد.

Flexion-Distriction ●

با استفاده از قابلیت خم شدن چندبخشی تخت، حرکات ملایمی در ناحیه کمری یا گردنی انجام می شود که ضمن کاهش فشار، باعث بهبود جریان مایع بین مهره ای می شود. این تکنیک برای درمان سیاتیک و دردهای مزمن کمری بسیار مؤثر است.

Rotational Correction / Side Lying Position ●

تقسیم بندی تخت به چند بخش متحرک، می توان بدن بیمار را در حالت جانبی قرار داد و اصلاحات ساختاری برای ستون فقرات، لگن و شانه ها انجام داد. این درمان برای بیماران دارای اسکولیوز یا عدم تقارن لگنی مناسب است.

Myofascial Release / Soft Tissue Mobilization ●

با تغییر پوزیشن ها و اعمال کشش در بافت ها، درمانگر می تواند تکنیک های رهاسازی عضلانی و فاشیال را راحت تر و مؤثرتر انجام دهد؛ به ویژه در نقاطی مانند گردن، شانه، همسترینگ و عضلات پشت.

ویژگی های برتر برای بهترین تجربه بیمار

با فناوری منحصر به فرد طراحی شده توسط متخصصان فنلاندی، تخت موبیلیزاسیون و منوپیلیشن **manuthera** از درمانگر پشتیبانی و بهترین تشخیص و درمان ممکن را برای بیماران فراهم می کند. یک تخت برای تمام درمانگران مانند: کایروپراکترها، فیزیو تراپیست ها، استئوپات ها، ماساژورهای ورزشی و ناپراپات ها **manuthera** با تکنیک های جدید درمانی و تشخیصی، درمان را به سطح جدیدی ارتقا داده است. این تخت با دو موتور بی صدا و جک های متنوع دارای سیستم کاربری جدید می باشد که با قابلیت ترکشن در پوزیشن های مختلف و حرکت های سه بعدی با استفاده از کشش، فلکشن و فلکشن جانبی انجام می شود. طراحی منحصر بفرد **manuthera** و ارگونومیک بودن آن کار درمانگر را آسان تر می کند، همچنین باعث کاهش فشار و نتایج درمانی بهتر می شود.

قسمت دو تکه قفسه سینه برای خم شدن عمودی قفسه سینه و حرکت چرخشی سه بعدی ابزاری منحصر به فرد برای موبیلیزاسیون و منوپیلیشن قفسه سینه

بخش پایین تنه با قابلیت کشش/خم شدن، حرکت جانبی و حرکت چرخشی سه بعدی

ساپورت زیر پا برای قرار گرفتن در حالت Tilt همچنین در حالت خوابیده

تغییر پوزیشن گردن در دو جهت

دارای قابلیت پیشرفته سه بعدی برای حرکت ایمن ستون فقرات گردنی و گردن از طریق حرکت عمودی و جانبی سر

عملکرد Drop:

درآپ ترکشن که امکان حرکت ساده تر و درمان های متنوع در ناحیه لگن را فراهم می کند

دستگیره های ارگونومیک و کاربری آسان برای قفل کردن حرکت در موقعیت دلخواه

تکیه گاه های بازو با تنظیم ارتفاع (تکیه گاه های بازو را می توان به پهلو متصل کرد تا به عنوان تکیه گاه جانبی عمل کند)


پایه های قابل تنظیم

اهرم تنظیم ارتفاع

چرخ های قفل دار برای جابجایی آسان

حالت Tilt up/Tilt Down برای استفاده آسان تر بیماران و رفع فشار ستون فقرات

قفل کامل، پشتیبانی بیشتری را برای تکنیک های درمانی سنگین فراهم می کند و تخت را در هر پوزیشن ثابت محکم می کند

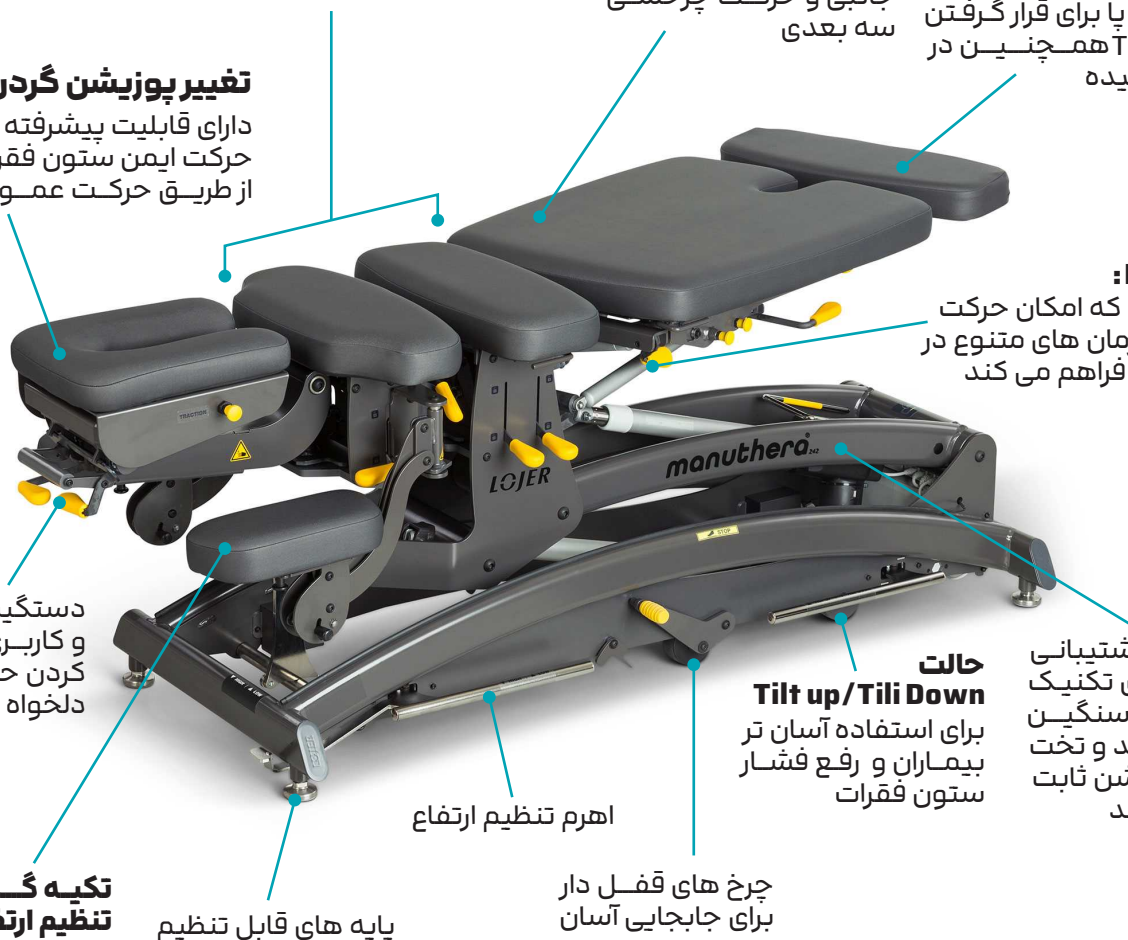


مشخصات فنی دستگاه	
طول	۱۹۰ سانتی متر
عرض	۵۴ سانتی متر
وزن	۱۷۰ کیلوگرم
تنظیم ارتفاع (بالا-پایین)	۵۱-۱۰۶ سانتی متر
شیب برقی به بالا/پایین	۵۲ درجه / ۳۲ درجه
حرکت قسمت سر (سه بعدی)	۳۵+ درجه / ۳۵- درجه (عمودی) ۰- ۱۸ درجه (افقی) ۵۰ درجه (شیب به جلو) ۲۸+ سانتی متر / ۵- درجه (تنظیم ارتفاع در صفحه افقی) ۰- ۶ سانتی متر (کشش)
حرکت تکیه گاه دست	۳+ - ۲۳- سانتی متر (عمودی)
حرکت قسمت بالای قفسه سینه (سه بعدی)	۱۵+ درجه / ۱۳- درجه (عمودی) ۰- ۱۸ درجه (افقی)
حرکت قسمت پایین بدن (سه بعدی)	۲۱.۵+ درجه / ۴۰- درجه (عمودی) ۰- ۱۸ درجه (افقی) ۰- ۲۰ درجه (چرخش) ۰- ۸ سانتی متر (کشش)
حرکت تکیه گاه پا	۰- ۸۵ درجه (عمودی) ۰- ۹۰ درجه (شیب تکیه گاه پا)



EASY EAR

NO.3, 9 TH FLOOR, AZARSHAHR ST,
IRANSHAHR ST, KARIMKHAN AVE, TEHRAN, IRAN
TEL: +98(21) 88785890-3
FAX: +98(21) 88345246

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر
خیابان آذرشهر، پلاک 3، طبقه 9
تلفن: ۸۸۷۸۵۸۹۰-۳
فکس: ۸۸۳۴۵۲۴۶

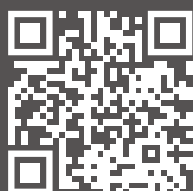

SEPEHRANMED.COM

